



E-STYLE GOLD & BLUE

Sagomatura facile, risultati sicuri.
Cambia le regole del gioco.



Progettato da Eighteeth per SIE

Eighteeth

E-STYLE GOLD

Kit di sagomatura

Trattamento Termico Gold



ORIFICE OPENER

25/.13



PREFLARING
GLIDE PATH

12.5/.3



SHAPING 1

17/.04 VT



SHAPING 2


25/.05

Forme e dimensioni personalizzate, utilizzo universale!

- Per ogni strumento, conicità, dimensione e sezione adeguate al proprio ruolo.
- Sistema adatto sia a casi semplici che complessi
- Ideale per il superamento di eventuali gradini (ledges)



#1 ORIFICE OPENER 25/.13

- Design speciale con parte lavorante di 6mm: migliore controllo visivo della profondità di inserimento coronale
- Crea spazio per la sagomatura preservando la dentina peri-cervicale.
- Previene sovra-allargamenti coronali o danni iatrogeni
- Limita l'effetto avvitaamento
- Sezione trasversale triangolare convessa 






#2 GLIDE PATH FILE 12.5/.03

- La punta ridotta e la sezione trasversale a "S" migliorano la penetrazione negli spazi anatomici ristretti.
- Dimensioni e design adeguati allo specifico ruolo clinico
- Sezione trasversale a S italica.



#3 SHAPING FILE 17/.04 VT

- Lo strumento a conicità variabile è semplice da utilizzare anche nei canali radicolari complessi.
- Il ridotto stress rotazionale minimizza il rischio di separazione dello strumento.
- Rimuove le interferenze creando le migliori condizioni per il successivo strumento di sagomatura
- Sezione trasversale a S italica.

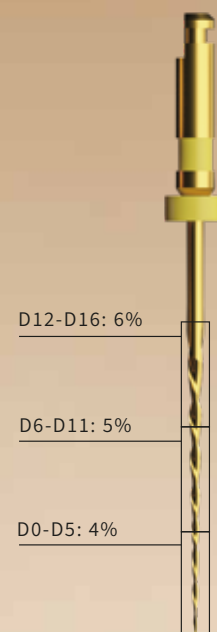


#4 SHAPING FILE 25/.05

- La sagomatura minimamente invasiva preserva lo spessore delle pareti radicolari
- Ottimali condizioni per ottenere una detersione profonda un sigillo canalare adeguato
- Sezione trasversale triangolare convessa




Per canali radicolari semplici e complessi: sequenze d'uso ideali in ogni situazione.

Sequenza clinica: la maggior parte dei canali

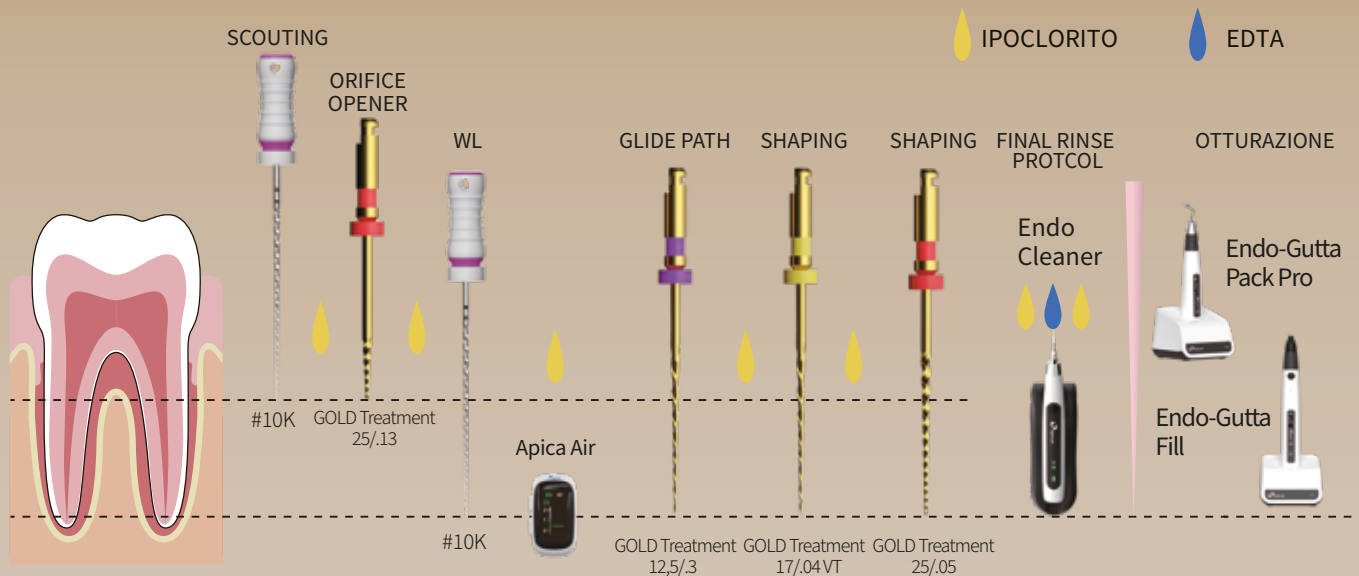

Sequenza clinica: canali complessi

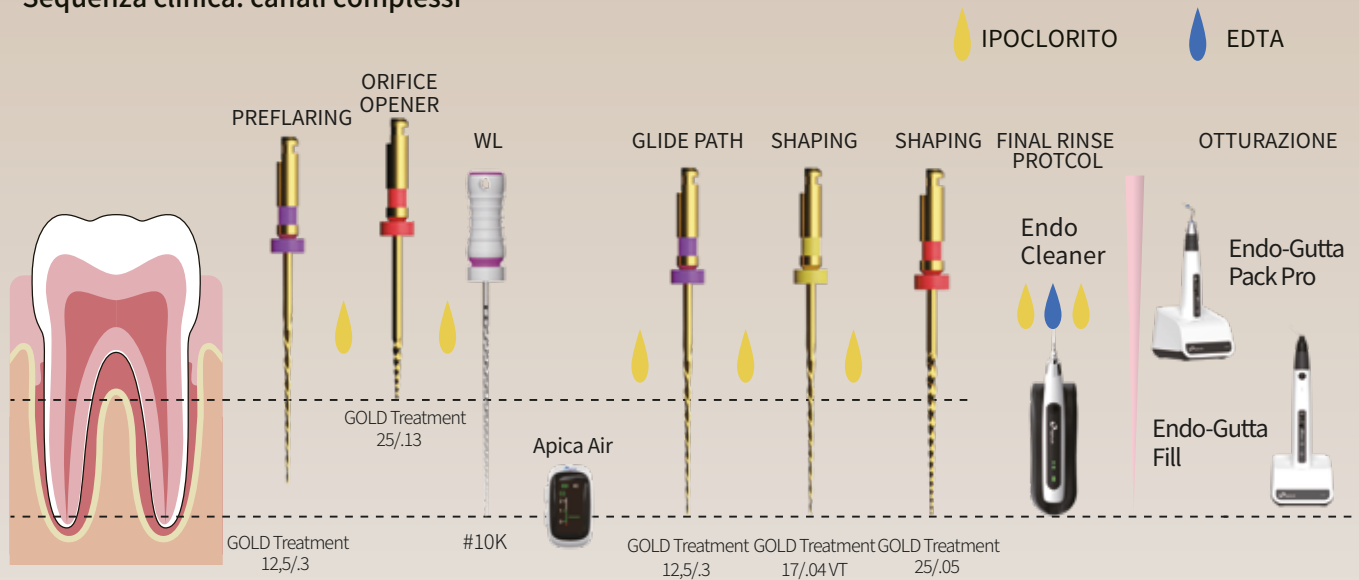

E-STYLE BLUE

Kit accessorio per rifinitura apicale

Trattamento Termico Blu



PREFLARING
GLIDE PATH

12,5/.3



FINISHER

35/.04



FINISHER

45/.03



FINISHER

60/.03

- Trattamento termico blu per uno strumento più flessibile ed una sagomatura minimamente invasiva.
- Adatto per la rifinitura di apici di maggiori dimensioni.
- Conicità maggiori, in grado di gestire una quantità superiore di detriti: ideale per la preparazione dei denti posteriori grazie alla facile pre-curvatura.

E-Style Gold	Rpm	N.cm
Orifice Opener	300	3.0 N.cm
Glide Path	350	2.5 N.cm
Shaping 1	350	2.5 N.cm
Shaping 2	350	2.5 N.cm

E-Style Blue	Rpm	N.cm
Glide Path	350	2.5 N.cm
Sagomatore apicale 1	350	2.5 N.cm
Sagomatore apicale 2	350	2.5 N.cm
Sagomatore apicale 3	350	2.5 N.cm



IN ITALIA I PRODOTTI SONO DISTRIBUITI E GARANTITI DA



INFO@DENTALICA.COM | NUMERO VERDE 800.70.71.72

