


IL SISTEMA delle tinte

Camaleon-Tech Gold dispone di un'ampia gamma di tinte utili a coprire tutte le esigenze di ricostruzione estetica.

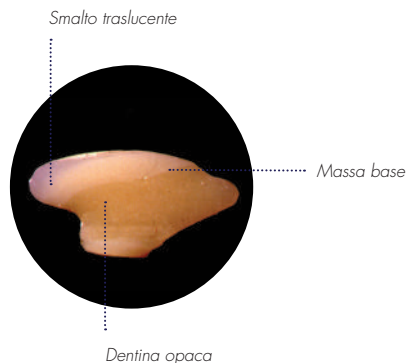

DENTINA OPACA (UO)*

* Universal Opaque

Grazie alla sua opacità blocca l'oscurità del cavo orale e maschera efficacemente le discromie dentali. Utile per grandi restauri di IV classe, chiusura di ampi diastemi e per veneering diretto.

MASSA BASE (Dentina)

(A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2)


Calibrate per riprodurre fedelmente l'intensità del colore naturale del restauro. Ci sono le tinte della gamma A e altre essenziali per fornire un ampio spettro cromatico e camaleontico. Possono essere usate anche da sole, senza ulteriore stratificazione.

SMALTO TRASLUCENTE


(UB, W3, ICL, IME, IWH)

Riproducono la traslucenza dello smalto naturale. Possono essere utilizzati anche in modo combinato con le tinte dentina. Ideali in ricostruzioni con evidenti necessità estetiche. Gli smalti devono essere posizionati in spessori ridotti e di max 0,5 -1 mm.

effetto CAMALEONTICO

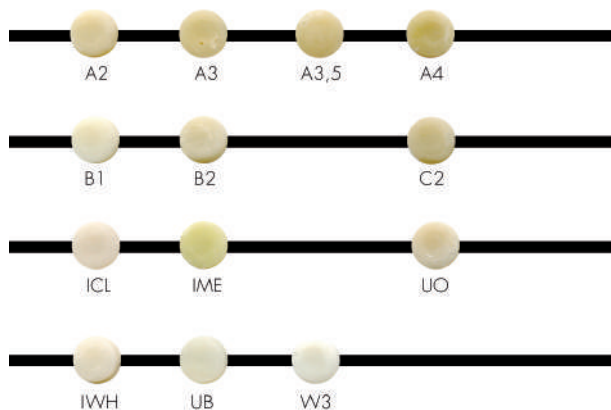

Opacità.

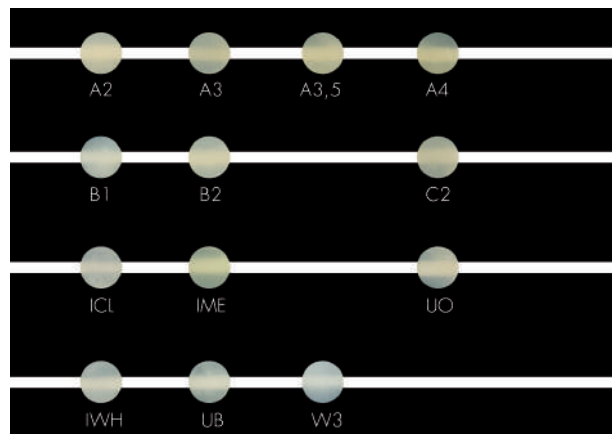

Traslucenze.