



HELIOS

Molto più di uno scanner

PRECISION TECH

Selezionato e garantito
da Dentalica.

Qualità Precision Tech.

Come tutti i prodotti che introduciamo
nella gamma Precision Tech, anche
gli scanner HELIOS rispondono ai migliori
standard tecnologici del mercato.
Testati, selezionati e garantiti da noi,
sono i migliori scanner intraorali
per la vostra professione.

Perché scegliere **Helios**?

Dentalica è da sempre alla ricerca dei migliori partner sul mercato per offrire ai propri clienti soluzioni all'avanguardia. È per questo che nasce HELIOS la gamma di scanner intraorali che vi garantisce la migliore esperienza di scansione mai vista.

Alte performance, qualità del prodotto, innovazione e tecnologia d'avanguardia, sono elementi imprescindibili nella nostra selezione.

Ma ciò che ci distingue è la cura per il cliente: Dentalica mette sempre il professionista al primo posto, garantendo un supporto a 360° dall'acquisto al post-vendita.



I plus che fanno la differenza




Velocità garantita

Con HELIOS scansione dell'intera arcata in meno di 30 secondi.



Calibrazione automatica

Una volta acceso HELIOS è subito pronto all'uso.

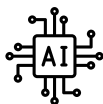

L'evoluzione tecnologica

L'evoluzione tecnologica di HELIOS filtra i tessuti molli in movimento, offrendo scansioni fluide e risultati dall'aspetto naturale.



Peso ridotto

Ancora più leggero, ancora più maneggevole e pratico, ottimo bilanciamento ed un design ergonomico.



Ortho Simulation

Strumento automatizzato che simula in 3D i risultati di trattamenti ortodontici, mostrando visivamente l'allineamento dentale previsto per una migliore comunicazione con il paziente.



Model Builder

Consente di creare modelli fisici da scansioni intraorali, offrendo strumenti per personalizzare la base, regolare parametri ed etichettare prima della stampa 3D. Ottimizza l'intero processo di stampa.






Profondità di campo

Il miglioramento della profondità di campo permette di ottenere scansioni in HD più accurate e veloci.



Gestione air mouse

La presenza di un giroscopio permette la gestione dell'acquisizione dell'immagine, ancora più pratica, senza dover utilizzare mouse o tastiera.

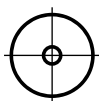

Precisione assoluta

La gamma HELIOS ha raggiunto livelli di precisione avanzati: la deviazione media di scansione dell'intera arcata in vivo è pari a 16.0 micron.



Cloud avanzato dedicato

Comunicazione in tempo reale con il laboratorio. Archiviazione dei dati senza limiti. Migliore e completa gestione del caso paziente.



Oral Health Report

Utilizza l'IA per identificare e organizzare dati chiave sulla salute orale in modo chiaro e visivo. Favorisce il coinvolgimento del paziente e può essere condiviso facilmente via e-mail o codice QR.



Wireless

Tecnologia Wi-Fi di livello flagship, per una connessione stabile senza interruzioni.



Con Helios hai molto di più



Scegliere la gamma HELIOS non significa solo dotarsi di uno scanner intraorale all'avanguardia, ma anche accedere a un ecosistema di servizi esclusivi pensati per supportare il clinico in ogni fase dell'utilizzo.

Collegamenti live

Grazie ai collegamenti in tempo reale, il nostro supporto tecnico è pronto ad assisterti durante le visite, aiutandoti a risolvere qualsiasi difficoltà sul momento.



Corsi dedicati

Accesso a una serie di corsi gratuiti per apprendere al meglio l'uso dello scanner e a percorsi formativi avanzati per approfondire la pratica e ottimizzare il flusso digitale.

Assistenza e supporto dedicato

Il nostro team di esperti è sempre al tuo fianco, dall'installazione al supporto continuo, per qualsiasi esigenza legata al software o alla presa dell'impronta.

Con Helios non paghi oltre

Nessun costo nascosto: una volta acquistato lo scanner, tutti gli aggiornamenti sono gratuiti e non ci sono fee annuali da sostenere. Con Helios, non acquisti solo un dispositivo, ma un'esperienza completa che valorizza il tuo lavoro e migliora la tua operatività quotidiana.

Helios 6X Pro

Cod. PRSCANPTXP

- Manipolo scanner
- Base d'appoggio
- 1 puntale S
- 3 puntali L
- Chiavetta USB software

Specifiche tecniche

Precisione	Arcata completa	16.0 µm
	Area di scansione	16 x 14 mm (L) - 12 x 12 mm (S)
Manipolo	Dimensioni	217 x 54 x 24 mm
	Peso	161,5 g
Puntale	Misura puntale (parte frontale)	22 x 18 mm (L) - 18.6 x 16.7 mm (S)
Connettività	Lunghezza	1.8m / manipolo rimovibile
	Tipologia	USB 3.0
Calibrazione	Precisione di scansione	Calibrazione libera
	Calibrazione colore	Calibrazione libera
Dati	Formato in uscita	STL/PLY/OBJ

Requisiti di sistema richiesti

Processore	Intel® Core™ i7-13700 13ª generazione (o superiore)
Memoria	32 GB (o superiore) DDR4, frequenza 2666 MHz (o superiore)
Hard drive	1 TB (o superiore) SSD
Scheda grafica	NVIDIA® GeForce® RTX 3060 (6 GB VRAM)
Display	15.6" FHD (1920x1080 o superiore)
Altro	USB 3.0
Sistema operativo	Windows 10/11
Optional	Touch screen

Ancora
più preciso
16.0 μm



Ancora più
maneggevole,
solo **161,5 g**

Helios **7X Pro**

Cod. PRSCANH7XP

- Manipolo scanner
- Base d'appoggio
- 1 puntale S
- 3 puntali L
- Chiavetta USB software
- 2 batterie da 3.100 mAh

Specifiche tecniche

Precisione	Arcata completa	16 µm
	Area di scansione	16 x 14 mm (L) - 12 x 12 mm (S)
	Peso	225 g
Puntale	Misura puntale (parte frontale)	22 x 18 mm (L) - 18.6 x 16.7 mm (S)
Connettività	Lunghezza	6 mt
	Tipologia	Wireless
Calibrazione	Precisione di scansione	Calibrazione libera
	Calibrazione colore	Calibrazione libera
Dati	Formato in uscita	STL/PLY

Requisiti di sistema richiesti

Processore	Intel® Core™ i7-13700 13ª generazione (o superiore)
Memoria	32 GB (o superiore) DDR4, frequenza 2666 MHz (o superiore)
Hard drive	1 TB (o superiore) SSD
Scheda grafica	NVIDIA® GeForce® RTX 4060 6GB (o superiore)
Display	15.6" FHD (1920x1080 o superiore)
Altro	USB 3.0
Sistema operativo	Windows 10/11
Optional	Touch screen

**Libertà
wireless,**
possibilità
senza confini



PRECISION TECH

Creato in esclusiva per

 **DENTALICA**
Into quality

PRECISION TECH è un marchio di:
DENTALICA S.p.A. – Via Rimini, 22 – 20142 Milano
info@dentalica.com – www.dentalica.com